
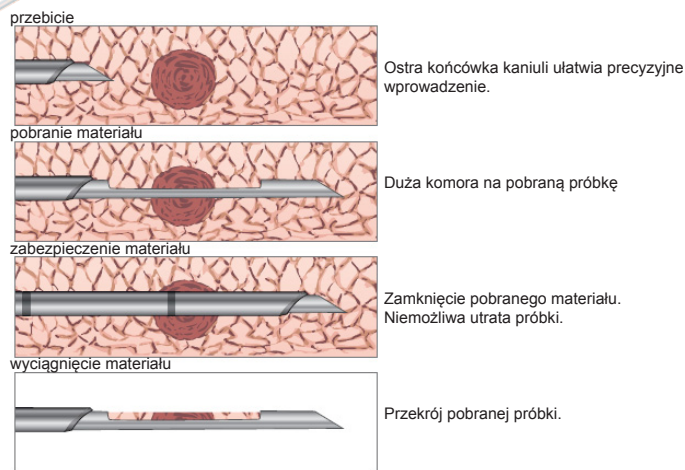



## System Biopsji PrimoCut

- prosta, ergonomiczna obsługa jedną ręką
- alternatywna głębokość nakłucia 6mm lub 15mm (całkowita głębokość 15mm lub 26mm)
- końcówka kaniuli PrimoCut jest szlifowana i polerowana w sposób szczególny z najwyższą precyzją
- duże próbki biopsji umożliwiają precyzyjną diagnostykę
- bezpieczne zamknięcie pobranej próbki


### Jednorazowego użytku system PrimoCut

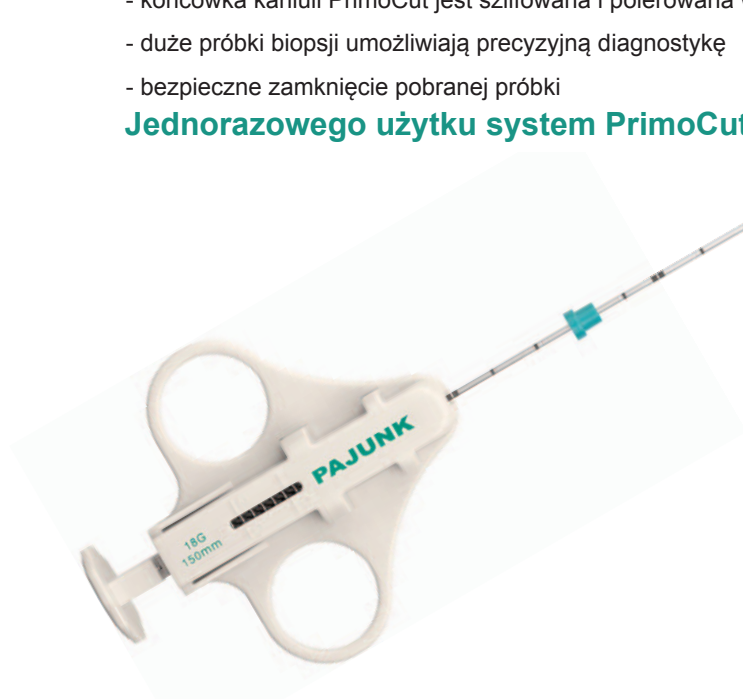


**Mechanizm zabezpieczający**  
Brak możliwości nieumyślnego użycia systemu PrimoCut.  
Większe bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy dla lekarza.

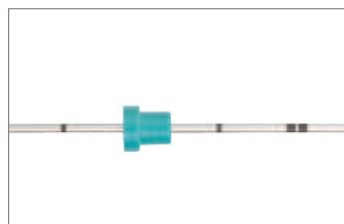

**Stopniowanie głębokości**  
Znakowanie kaniuli w krokach co 1 cm proste oznaczenie głębokości nakłucia  
**Specjalny szlif końcówki (2 cm)**  
Lepsza identyfikacja końcówki kaniuli przy użyciu USG

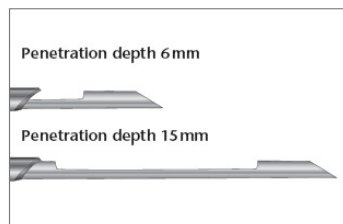

**Regulowana głębokość wnikania**  
Wybierz między 6 i 15 mm

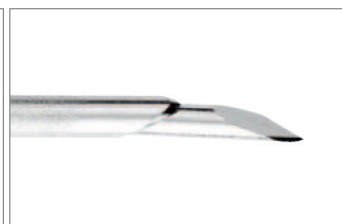

**Końcówka PrimoCut**  
Elektropolerowana końcówka PrimoCut większa ostrość i gwarancja bezpieczeństwa  
- precyzyjne cięcie kaniuli podczas penetracji tkanek  
- brak przemieszczenia tkanki



**Tuleja ochronna z końcówką trokar**  
Jednorazowe nakłucie umożliwia pobranie kilku próbek.

Produkt	Rozmiar	Kod	Jedn. zakupu
Sterylny system PrimoCut	18 G x 100 mm (1.20 mm)	415S120100	10
	18 G x 150 mm (1.20 mm)	415S120150	10
	18 G x 200 mm (1.20 mm)	415S120200	10
	18 G x 250 mm (1.20 mm)	415S120250	10
	18 G x 280 mm (1.20 mm)	415S120280	10
	16 G x 100 mm (1.60 mm)	415S160100	10
	16 G x 150 mm (1.60 mm)	415S160150	10
	16 G x 200 mm (1.60 mm)	415S160200	10

Rozmiar	Kod	Jedn. zakupu
17 G x 98mm	413S150112	10
17 G x 162mm	413S150162	10
14 G x 112mm	413S200112	10
14 G x 162mm	413S200162	10